



Feline Blood Typing Kit

Моля, прочетете внимателно инструкцията преди употреба.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Този комплект е импрегниран със сухи антитела Анти-А или лектин за определяне на кръвна група А, В или АВ.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

Всяка кутия съдържа:


КОМПОНЕНТИ	1 ТЕСТ	5 ТЕСТА	10 ТЕСТА
Пластмасови пликчета, всеки съдържащ комплект за определяне на кръвна група, дървени стикове и влагопоглъщател	1	5	10
Еднократна пипета	2	10	20
Епруветка с буфер	1	5	10
Карта за определяне на кръвна група	1	5	10
Ръководство за употреба	1	1	1

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТА




1

Съберете 0,5 ml кръв
(използвайте епруветка с EDTA или друг антикоагулант)

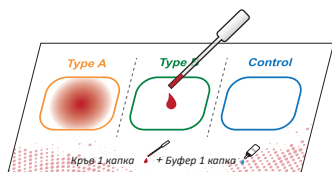


2

Поставете една капка кръв (20–30 µL) във всяко поле на кръвната карта.

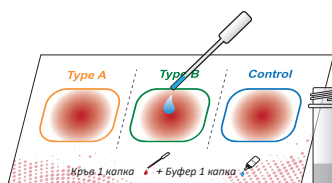


3

Поставете една капка буфер (20–30 µL) във всяко поле.

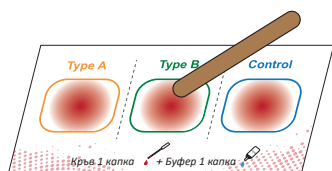

4

Разбъркайте със стика за 15 секунди.
(Използвайте различен стик във всяко поле)

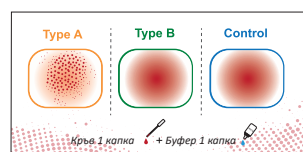

5


Прегледайте аглутинацията в рамките на 2 минути.

ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Тип А			Тип В		
Тип А	Тип В	Контрола	Тип А	Тип В	Контрола
Аглутинация в поле А			Аглутинация в поле В		
Тип АВ			Фалшиво положителен (+)		
Тип А	Тип В	Контрола	Тип А	Тип В	Контрола
Аглутинация в поле А и В			Аглутинация в контролно поле		

Фалшиво положителен резултат (+): може да се дължи на кръв с нарушени качества или на автоимунно хемолитично заболяване.

ДОПУСТИМИ КРЪВОПРЕЛИВАНИЯ

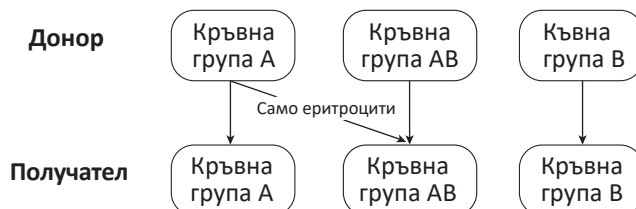

※ Преди кръвопреливане е необходимо също да се извърши основен кръстосан пробен тест (major crossmatch), за да се установи наличието на естествено възникнали, но неизвестни алоантигени.

НАЧИН НА СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ

	Условия на съхранение	Срок на годност от датата на производство
Неотворен	Стайна температура (2–30°C)/ Влажност (20–80%)	12 месеца
Отворен	Стайна температура (16–26°C)/ Влажност (20–80%)	Незабавно

ОГРАНИЧЕНИЕ

1. Не използвайте кръв, събрана преди повече от 5 дни.
2. Да се използва от ветеринарен лекар.
3. Съхранявайте продукта при стайна температура.
4. При пациенти с автоимунни заболявания съществува риск от получаване на фалшиво положителни или фалшиво отрицателни резултати.
5. Хематокритът на пробата трябва да бъде 20–35% за аглутинация при определяне на кръвната група на котки.
6. Продуктът не трябва да се използва след изтичане на срока на годност.
7. С цел предотвратяване на неправилна употреба и запазване на качеството, използвайте само буфера, включен в комплекта.



4F., No. 25, Wugong 5th Rd., Xinzhuang Dist.,
New Taipei City 248020, Taiwan
TEL : +886-2-5591-6688 FAX : +886-2-6625-8182
www.bioguardlabs.com



ул. "Васил Левски" №258, 4000 Пловдив, България
Тел.: +359 876 86 79 99 | +359 876 51 96 72 | +359 878 26 24 45
Тел. склад: +359 878 65 60 24 | +359 894 34 29 45
www.vpeco.bg | office@vpeco.bg